

basall

basall

iPilator GP582

MANUAL DO USUÁRIO

Obrigado por adquirir um produto Basall!

Leia este manual com atenção antes do uso e guarde-o de forma adequada para futuras consultas.

Recomendamos a conservação da embalagem do aparelho para o caso de eventuais dificuldades técnicas.



**PRODUTO CADASTRADO NA ANVISA SOB Nº
80520090015**

Responsabilidade

Cabe ao proprietário, identificado na nota fiscal, a total responsabilidade pelo produto iPilator GP582, garantindo que o mesmo não será repassado, emprestado ou utilizado em terceiros sem que estes tenham lido e compreendido o manual do usuário, estando cientes dos riscos que o produto poderá causar se for utilizado de forma inadequada.

O uso inadequado deste produto poderá gerar sequelas irreparáveis para o usuário ou terceiros. Mantenha o produto sempre longe do alcance de crianças.

O iPilator GP582 foi exaustivamente testado e aprovado pelos órgãos sanitários competentes, estando apto para utilização em todo território nacional. Os tratamentos consistem em aplicações periódicas, com intervalos variáveis, de acordo com cada usuário e condição clínica. O usuário precisa estar absolutamente ciente que, a redução dos pelos, e/ou o rejuvenescimento e/ou o tratamento da acne só poderão ser alcançados após a realização de todas as sessões propostas.

Responsabilidade sobre os resultados:

O iPilator GP582 é um aparelho utilizado para os tratamentos de remoção de pelos, rejuvenescimento e tratamento contra a acne, baseado em estudos científicos que comprovam a eficácia da sua tecnologia.

O aparelho tem uma obrigação de meio e não de fim. Isso significa que cada paciente pode reagir de forma diferente ao tratamento. A eficácia dos resultados depende de fatores fisiológicos de cada pessoa e da forma de aplicação, não havendo garantias por parte do fabricante/ distribuidor.

Índice

Introdução	1
Mecanismo de ação	2
Dentro da Embalagem	3
Estrutura do aparelho	4
Limpeza e conservação	5
Preparando o aparelho	6
Instruções de uso	8
Advertências e Precauções	14
Contra Indicação	16
Efeito Colateral	22
Proteção do Meio Ambiente	23
Solução de Problemas	24
Especificação	26
Pictogramas	27

Introdução

O iPilator GP582 é um aparelho portátil, inteligente, de fácil aprendizado, seguro e fácil de usar. Desenvolvido para uso conveniente e confortável em sua própria casa ou onde desejar.

Utiliza a tecnologia da fototerapia por Luz Intensa Pulsada (IPL), um tratamento não invasivo destinado à eliminação dos pelos, tratamento contra a acne e rejuvenescimento. É uma tecnologia amplamente utilizada pelas mais renomadas clínicas de estética no mundo e agora disponibilizada no Brasil pela Basall.

Mecanismo de ação

Fotodepilação (Hair Removal - HR)

Esta técnica de eliminação de pelos consiste na aplicação de pulsos de luz concentrada e filtrada através de uma lâmpada especial de xênon. Parte desta luz é refletida pela pele devido a coloração clara e absorvida no pelo devido a coloração escura. No pelo é convertida em calor enfraquecendo progressivamente os folículos pilosos e inibindo o crescimento dos pelos. Desta forma este tratamento promove a eliminação progressiva dos pelos de forma duradoura. O princípio básico da Fotodepilação é o conceito da Fototermólise Seletiva, onde a luz é específica para os seus alvos, no caso a melanina. De forma simplificada significa que o pigmento (melanina) presente dentro dos bulbos pilares absorve a energia emitida pela lâmpada de xênon, esta energia é transformada em calor aquecendo o bulbo capilar e gradativamente destruindo os pelos.

Rejuvenescimento (Skin Rejuvenation - SR)

A lâmpada com filtro para rejuvenescimento ativa os fibroblastos estimulando-os a produzir novo colágeno e fibras elásticas. Consequentemente devolve a elasticidade da pele minimizando os efeitos do envelhecimento e atenuando as rugas. O seu efeito photothermal ativa a microcirculação sanguínea, melhorando o aspecto da pele.

Tratamento contra a Acne (Acne - AC)

A Lâmpada com filtro para tratamento contra a acne emite uma luz que penetra na pele, estimulando a secreção de uma porfirina com ação bactericida, eliminando a bactéria causadora da acne - Propionibacterium acnes.

Conheça o aparelho e opcionais

1. Aparelho GP582

2. Lâmpada Skin Rejuvenation -SR (Opcional)



4. Lâmpada Acne - AC (Opcional)

3. Lâmpada Hair Removal - HR Fotodepilação



5. Fonte



6. Óculos de Proteção




7. Manual do usuário



8. Certificado de Garantia

Estrutura do aparelho

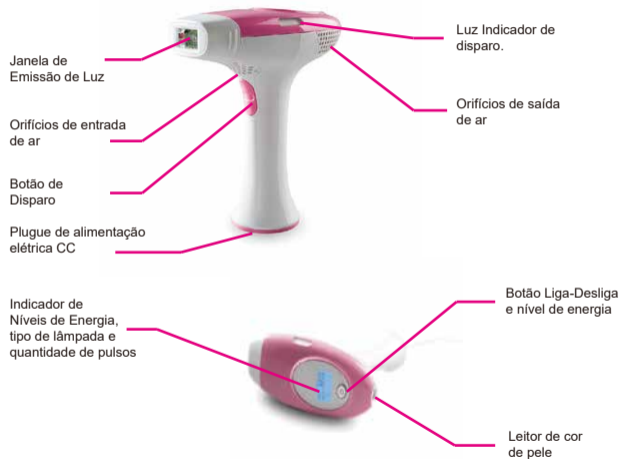

Limpeza e conservação do aparelho

- Desligue o aparelho removendo o plugue da tomada de energia elétrica antes de realizar o processo de limpeza;
- Na unidade principal passe um pano limpo, umedecido com álcool e enxugue com pano seco. Este procedimento deve ser feito antes e depois de cada uso, pois isso ajuda a evitar a disseminação dos germes. Os germes podem causar infecções;
- Nunca sature o pano com álcool, pois este poderá entrar nas junções plásticas ou vedações e danificar o aparelho;
- Sempre que for utilizar o aparelho após a limpeza, aguarde pelo menos 15 minutos para assegurar que o aparelho estará livre de umidade;
- Sempre antes e depois de utilizar o aparelho faça a limpeza da janela de emissão de luz com hastes de algodão seca. Esta janela é de suma importância para eficácia no tratamento, se estiver suja ou manchada, parte da luz transformará em energia térmica sobre a lente, superaquecendo e podendo queimar a lâmpada. Por outro lado faltará energia para o tratamento.
- Nunca borrife ou derrube álcool ou qualquer líquido sobre o aparelho;
- Nunca imerja o aparelho em nenhum líquido;
- Após o uso, guarde sempre o aparelho longe da luz direta solar, umidade e calor excessivo.

Preparando o aparelho

Escolha da lâmpada

O Aparelho pode ser utilizado para 3 tratamentos, sendo que o que diferencia cada tratamento é a lâmpada com diferentes filtros de luz. Cada filtro de luz determina o comprimento de onda de luz. Na parte traseira da lâmpada estará indicado para qual tratamento ela é indicada, como na imagem abaixo.



- HR - Fotodepilação
- SR - Rejuvenescimento
- AC - Acne

Lâmpada para Remoção de pelos

A lâmpada para fotodepilação tem a identificação HR, que significa Hair Removal e possui filtro com comprimento de onda maior que 510nm

Lâmpada para Rejuvenescimento

A lâmpada para rejuvenescimento tem a identificação SR, que significa Skin Rejuvenation e possui filtro com comprimento de onda maior que 560nm

Lâmpada para tratamento da Acne

A lâmpada para tratamento da Acne tem a identificação AC, que significa Acne e possui filtro com comprimento de onda maior que 410nm

Preparando o aparelho

Substituição da lâmpada

Para inserir uma lâmpada basta pressioná-la contra o aparelho até o encaixe total. Escolha a lâmpada a ser utilizada, de acordo com o tratamento escolhido. O procedimento deve ser feito com o aparelho desconectado da corrente elétrica.

Para a troca de lâmpadas, posicione o aparelho na vertical, com uma das mãos segure o aparelho e com a outra segure a lâmpada sobre as ranhuras e puxe no sentido contrário ao aparelho, de forma alinhada, para arrancá-la.



Instruções de Uso

Leia o atentamente os capítulos Advertências e Precauções e Contraindicação antes de utilizar o aparelho, qualquer dúvida procure orientação médica.

Passo 1 - Verifique se sua pele é compatível

Este aparelho foi desenvolvido para uso em pele leitosa, branca, morena clara e morena média, não para pele negra, morena escura, mulata ou pele bronzeada. O tratamento de fotodepilação é indicado apenas para pelo negro, castanho escuro, castanho e louro escuro.

Em pelos ruivos, brancos e louros claro o tratamento não será eficaz. Abaixo tabela de recomendações:

TABELA DE APLICAÇÃO DE NÍVEIS DE ENERGIA		COR DA PELE					
		LEITOSA	BRANCA	MORENA CLARA	MORENA MÉDIA	MORENA ESCURA	NEGRA
COR DO PELO	PRETO	● 4 ou 5	● 3 ou 4	● 2 ou 3	● 1 ou 2	●	●
	CASTANHO ESCURO	● 4 ou 5	● 3 ou 4	● 2 ou 3	● 1 ou 2	●	●
	CASTANHO	● 4 ou 5	● 3 ou 4	● 2 ou 3	● 1 ou 2	●	●
	LOURO ESCURO	● 4 ou 5	● 3 ou 4	● 2 ou 3	● 1 ou 2	●	●
	LOURO CLARO	●	●	●	●	●	●
	RUIVO	●	●	●	●	●	●
	BRANCO / GRISALHO	●	●	●	●	●	●

Para pele morena média utilize níveis de energia baixos 1 ou 2.

Para pele morena clara utilize níveis de energia médio baixo 2 ou 3.

Para pele branca utilize níveis de energia médio alto 3 ou 4.

Para peles leitosa utilize níveis de energia alto 4 ou 5.

Instruções de Uso

Importante: Pele bronzeada não significa apenas aquela que recebeu banho de sol e está vermelha ou escurecida, dependendo do organismo pode demorar até meses para pele voltar ao estado natural. A aplicação em pele bronzeada pode gerar manchas na pele e queimaduras.

Passo 2 - Preparação da área (Apenas para o tratamento de Fotodepilação)

Depile, com lâmina, as áreas que serão tratadas até que não se enxergue mais os pelos. De preferência faça esse procedimento no dia anterior ao início do tratamento. Não utilize cera ou qualquer outro processo que arranque os pelos, pois estes são justamente os agentes que transportam a energia para os bulbos pilares e células mãe dos pelos. Sem eles o processo não é eficaz

(Para o tratamento da Acne ou Rejuvenescimento desconsidere este passo).

Passo 3 - Limpeza

Remova toda e qualquer substância estranha da pele tais como desodorantes, hidratantes, loções, perfumes, bronzeadores e protetores solares.

Enxague com abundância e seque com um pano limpo e macio. Remova todos os objetos refletoras do corpo tais como joias, bijuterias, relógios, etc.

Passo 4 - Ajuste o iPilator

Retire o aparelho da embalagem, verifique se não existe nenhum corpo estranho obstruindo os orifícios de entrada e saída de ar do aparelho e certifique-se que não tenha peças soltas ou com aparência de danificada, sinais que o aparelho sofreu queda ou sinal que já foi aberto. Caso positivo não ligue o aparelho e entre em contato com a Basall. Caso contrário, escolha a lâmpada adequada para o seu tratamento (SR, HR ou AC), encaixe adequadamente no aparelho, conecte o adaptador de energia no plugue de alimentação elétrica e conecte a outra

Instruções de Uso

extremidade do adaptador na tomada. Pressione e segure, por 2 segundos, o botão liga-desliga para ligar o aparelho.

Neste momento as luzes de indicação de disparo ficarão vermelhas, o visor LCD acenderá e o leitor de cor de pele estará apto para leitura. Basta encostar o sensor na região da pele onde acontecerá o tratamento e aguardar a leitura do seu fototipo pelo aparelho.

Importante: Sempre posicione o sensor de cor de pele na parte mais escura da região que se pretende tratar. O sensor é apenas um dispositivo para auxiliar se a pele pode ou não ser tratada com a tecnologia de IPL. Mas este dispositivo não sobrepõe a regra determinada na Tabela de aplicação e níveis de energia, ou seja, não utilize este aparelho em pele negra, morena escura, mulata ou bronzeada.


Se a cor de pele estiver dentro da regra determinada pela tabela de aplicação e também passar no leitor de cor de pele, o aparelho ligará a ventoinha de arrefecimento e as luzes piscarão vermelho/verde.

Confira se no visor LCD a lâmpada reconhecida pelo aparelho realmente é a escolhida para o tratamento (AC, HR ou SR). Caso esteja divergente, não inicie o tratamento e entre em contato com a Basall.

Pelo mesmo botão liga-desliga ajuste o nível de energia conforme recomendado na tabela de aplicação de níveis de energia.

Instruções de Uso

Entendendo o visor LCD:

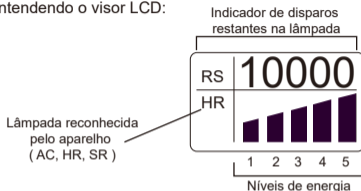

Passo 5 - Teste

Coloque os óculos de proteção antes de iniciar o tratamento e com uma haste de algodão faça a limpeza da janela de emissão de luz.


Escolha uma parte interna do braço para testar a susceptibilidade da sua pele e aplique 5 disparos. Aguarde 24 horas, se houver vermelhidão, inchaço, queimaduras, irritação ou qualquer outro desconforto, não use o aparelho antes de uma consulta completa com um médico. Se não houver anormalidades na pele após esse período, inicie o tratamento.

Instruções de Uso

Passo 6 - Aplicação

Coloque os óculos de proteção antes de iniciar o tratamento.

Como mostrado na figura 1, incline aparelho em direção à pele, de forma que o bocal fique em um ângulo de 90 graus. Apenas quando a luz lateral ficar verde, pressione o botão de disparo. Dispare sucessivamente na pele com o método de “sobreposição” como mostrado na figura 2. Um terço do foco de luz pode ficar sobreposto a cada região da pele.

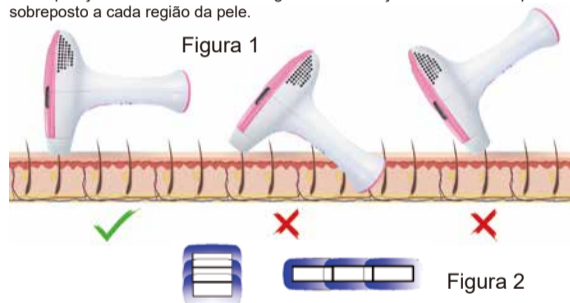

A velocidade de aplicação varia em função do nível de energia utilizado. Quanto maior a energia utilizada, mais lento ficará o aparelho. No nível 1 cada disparo dura em torno de 1,8 segundos, no nível 5 em torno de 3,7 segundos. Não repita o tratamento na mesma área durante a mesma sessão. Isso aumenta o risco de reações dermatológicas e não acelera o processo de depilação.

Instruções de Uso

Passo 7 - Desligar

Terminado a sessão desligue o aparelho pressionando o botão liga-desliga, retire o adaptador de energia da tomada e depois remova o plugue do aparelho.

Execute o procedimento de limpeza conforme descrito no capítulo Limpeza e conservação do aparelho.

Passo 8 - Hidratação

Terminado o processo de aplicação a pele ficará levemente avermelhada e sensível. Neste momento é aconselhada a aplicação de cremes hidratantes e protetor solar com FPS 60 ou mais. Repita este procedimento diariamente durante o período de tratamento.

Evite luz solar na área aplicada pelo menos 14 dias após a aplicação.

Passo 9 - Frequência de aplicação

Para o Tratamento de Fotodepilação:

Nas primeiras 5 sessões de tratamento, faça a aplicação a cada 15 ou 20 dias; Nas sessões seguintes a aplicação deverá ser feita com um intervalo de 30 dias.

Se você notar que os pelos estão nascendo fracos, mas continuam nascendo, continue a aplicação a cada 30 dias até atingir o nível desejado.

Se na décima sessão de tratamento não houver alteração no diâmetro do pelo e estes continuam nascendo normalmente, suspenda o tratamento e peça orientação médica. Provavelmente o seu organismo não é sensível ao tratamento por luz intensa pulsada.

Instruções de Uso

Para o Tratamento contra Acne:

Nas primeiras 4 sessões de tratamento, faça a aplicação a cada 2 dias; depois faça mais 6 sessões com intervalo de 5 dias, totalizando 10 aplicações.

Deixe sua pele descansar por pelo menos 3 meses depois da última aplicação, antes de refazer o tratamento.

Para o Tratamento de rejuvenescimento:

Nas primeiras 4 sessões de tratamento, faça a aplicação a cada 3 dias; depois faça mais 6 aplicações com intervalo de 7 dias, totalizando 10 aplicações.

Deixe sua pele descansar por pelo menos 3 meses depois da última aplicação, antes de refazer o tratamento.



Advertências e Precauções

- Somente inicie o uso do aparelho após ler atentamente as instruções especificadas neste manual;
- Não utilize o aparelho sobre espinhas, pois isso não ajuda o processo de cura e pode causar cicatrizes;
- Se sua pele for muito clara, você estará mais propenso a apresentar vermelhidão na região do tratamento. Em quase todos os casos, tal vermelhidão é normal e não deve causar preocupação. Se você notar uma reação adversa, interrompa o tratamento e entre em contato com seu médico;
- Não derrube ou deixe o aparelho sujeito a quedas ou pancadas bruscas. Este é um aparelho de precisão e o desempenho do produto pode ser prejudicado;
- Não utilize este aparelho sobre lesões cancerosas ou com suspeita de câncer;
- Não utilize este aparelho sobre pintas ou manchas congênitas;
- Entre em contato com seu médico e interrompa o uso deste aparelho em caso de reações adversas, não consultar o médico pode causar a piora da reação.
- Consulte seu médico antes de usar o aparelho se estiver usando algum antibiótico tópico, ou um produto ou medicamento que possa descamar ou fazer que sua pele fique sensível ao calor;

Advertências e Precauções

- Não utilize o aparelho diretamente sobre a região dos olhos, podendo causar cegueira irreversível;
- Não utilize o aparelho sobre áreas como mamilos, pequenos lábios, aréolas, vagina, ânus, dentro das narinas, dentro dos ouvidos ou no escroto;
- Não use este aparelho além do recomendado. O uso além do recomendado pode causar queimaduras ou lesões;
- Não use o aparelho se perceber lesões ou piora após o uso. Se estiver preocupado sobre qualquer alteração na pele, entre em contato com seu médico;
- Não use o aparelho sobre ou próximo à área de aplicação de uma injeção recente de esteroides;
- Não use com substâncias, loções ou pomadas que contenham ingredientes produtores de calor;
- Somente para uso individual. Não compartilhe o aparelho com outras pessoas;
- Não ligue o aparelho em ambientes inflamáveis;

Advertências e Precauções

Nunca aplique o aparelho sobre :

- Regiões lesionadas;
- Regiões dos olhos e boca;
- Acnes em processo inflamatório ou infeccioso;
- Cravo aberto (cravo preto) ou fechado (cravo branco);
- Acnes nodulares ou císticas graves;
- Áreas com as seguintes enfermidades:
 - Região inflamada em função de espinhas ou eritemas;
 - Região com metal, plástico e próteses de silicone;
 - Região pigmentada resultado de coceira, queimadura ou estímulo físico;
 - Região com inflamação causada por cosméticos;
 - Região de mucosas.

Devido à proximidade do comprimento de ondas as lâmpadas para tratamento de Acne e Rejuvenescimento podem causar epilação indesejada.

Contraindicação

Não utilize o aparelho se você se encaixar em qualquer um dos seguintes tópicos:

- Doenças dermatológicas, como câncer de pele ativo, histórico de câncer de pele ou qualquer outro câncer localizado nas áreas a serem tratadas;
- Lesões pré-cancerosas ou sinais de nascença atípicos nas áreas em que o tratamento será realizado;
- Histórico de distúrbio de colágeno, incluindo formação de quelóide ou histórico de má cicatrização;
- Histórico de doenças vasculares, como a presença de varizes ou ectasia vascular, nas áreas em que o tratamento será realizado;
- Infecções, eczema, queimaduras, inflamação de folículos capilares, feridas abertas, escoriações, herpes simples, feridas ou lesões e hematomas nas áreas em que o tratamento será realizado;
- Cirurgia nas áreas em que o tratamento será realizado;
- Epilepsia com sensibilidade à luz;

Contraindicação

- Diabetes, lúpus eritematoso, porfiria ou alguma doença cardíaca congestiva;
- Sofrer de qualquer tipo de alergia de pele;
- Qualquer distúrbio de coagulação sanguínea;
- Histórico de doença imunossupressora (incluindo infecção por HIV ou AIDS);
- Pacientes com Melasma ou manchas de pele;
- Se a sua pele estiver sendo ou foi tratada recentemente com alfa-hidroácidos (AHAs), beta-hidroácidos (BHAs), isotretinoína tópica, tretinoína ou ácido azelaico;
- Se você tiver tomado isotretinoína sistêmica (Roacutan ou similares), ou etretinatos (Acitretin ou similares) nos últimos 3 meses. Esse tratamento pode deixar a pele mais suscetível a cortes, feridas e irritações;
- Se você estiver sob o efeito de analgésicos, pois eles reduzem a sensibilidade da pele ao calor;

Contra Indicação

- Se você estiver tomando agentes ou medicamentos fotossensibilizantes, leia a bula do remédio e não use o aparelho caso esteja especificado que ele pode provocar reações fotoalérgicas e fototóxicas ou que você deve evitar a exposição ao sol durante o uso do remédio;
- Se você estiver tomando medicamentos anticoagulantes, incluindo o uso intenso de AAS, de forma que não seja possível suspender o uso por no mínimo uma semana antes de cada sessão;
- Se você estiver tomando medicamentos imunossupressores;
- Pessoas com Diabetes mellitus: possível bolha de água causada por tratamentos;
- Pessoas com queimaduras de sol há menos de duas semanas;
- Pessoas em uso de medicamentos fotossensibilizantes ou fotocondutores, como por exemplo retinoides e neomicina, etc.;
- Pessoas que estejam na vigência de procedimento dermatológicos. Consulte seu médico antes de utilizar o aparelho;
- Mulheres grávidas ou durante o período de amamentação;

Contra Indicação

- Pessoas que não se enquadram na tabela de cor (moreno escuro, negros e mulatos);
- Aplicação em crianças;
- Os tratamentos para Rejuvenescimento (SR) e Tratamento Contra Acne (AC) são contraindicados para regiões que possuem pelos, principalmente para homens com barba. Além de causar desconforto devido o calor gerado, pode causar queimaduras e ainda enfraquecer o pelo causando depilação definitiva. Região das costas, ombros, peitoral e coxas, também são áreas que possuem pelo e também estão propensas ao aparecimento de acne;
- Pessoas que realizaram depilação com outros métodos nas 6 semanas anteriores à aplicação. (Exceto depilação com lâmina);
- Pessoas que estejam se submetendo a tratamento com óleos essenciais;
- Pessoas que façam ingestão de Aspirina ou de imunossupressores.

Efeito Colateral

Os testes não relataram grandes efeitos colaterais, entretanto, podem ocorrer dor passageira e um aspecto de avermelhado na pele de forma passageira.

Além disso, estudos mostram que o tratamento com IPL pode apresentar os seguintes efeitos adversos:

- Formação de crostas
- Manchas transitórias
- Crescimento paradoxal dos pelos
- Pelos encravados
- Avermelhamento da pele
- Desencadeamento do melasma incipientes (que ainda não havia aflorado).

Se você notar qualquer efeito colateral, interrompa imediatamente o seu tratamento e consulte seu médico.

Proteção do Meio Ambiente

Como qualquer outro aparelho eletrônico, o iPilator GP582 é composto por diversos materiais, como plásticos, metais pesados como o chumbo, borrachas, entre outros. Sendo assim, existem riscos de contaminação ao meio ambiente associados à eliminação deste aparelho e seus acessórios ao final de suas vidas úteis.

Preocupada com o meio ambiente, e atendendo o disposto na Lei nº 12305, de 02 de Agosto de 2010, a qual institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos, a Basall orienta que o descarte deste aparelho e seus acessórios não sejam destinados em lixo comum, pois alguns materiais demoram a se decompor, causando danos ao meio ambiente.

Contate empresas no ramo de coleta seletiva e/ou reciclagem de sua cidade ou região para o destino correto destes materiais.

O APARELHO E SUAS PARTES DEVEM SER ELIMINADOS, AO FIM DA VIDA ÚTIL, DE ACORDO COM NORMAS FEDERAIS E/ OU ESTADUAIS E/OU MUNICIPAIS.

Solução de problemas

Em caso de falha durante a operação, siga a tabela abaixo. Se o problema não for resolvido ou não trabalhar normalmente, desligue e contate a Basall.

PROBLEMA	CAUSA POSSÍVEL	SOLUÇÃO
A luz indicadora de ligado não acende quando conecto o carregador na energia elétrica	A tomada não está funcionando. O aparelho está com defeito.	Conecte outro aparelho à tomada para verificar se ela está funcionando. Caso a tomada esteja funcionando, mas o aparelho não , entre em contato com a Basall Entre em contato o com a Basall
Não consigo aumentar ou diminuir os níveis de energia	O aparelho deve ser reiniciado.	Desligue-o e ligue novamente. Caso você não consiga ajustar os níveis de energia, entre em contato com a Basall
O aparelho está ligado mas o aparelho não dispara	O aparelho não está devidamente acoplado à pele. Ou a lâmpada não está devidamente encaixada no aparelho Aparelho superaquecido	Incline o cabeçote do aparelho em direção à pele em um ângulo de 90 graus. Apenas quando a luz lateral se acender(indicador de acoplamento correto), pressione o botão de disparo. Desligue o aparelho, aguarde 45 minutos e retome o tratamento.
Ventilação que sai do aparelho está quente	Isso é normal, pois o aparelho possui um sistema de arrefecimento por ventilação forçada.	
Aparelho produz odor de pelo queimado	Falta depilação ou depilação inadequada. Sujeira no vidro da lâmpada	Depile com lamina antes de iniciar o tratamento vide capítulo, instruções de uso, Passo 2 - Preparação da área. (Apenas para o tratamento de fotodepilação) Limpe a região com haste de algodão seca

Solução de problemas

PROBLEMA	CAUSA POSSÍVEL	SOLUÇÃO
O tratamento está dolorido	Verifique de sua pele é compatível e se a lâmpada está adequada para o tratamento Área aplicada está sem depilação Aparelho com defeito Está usando o aparelho em áreas inadequadas	Caso não seja pare imediatamente o tratamento. Se for compatível verifique se os ajuste de níveis de energia estão compatíveis com cor de pele e cor de pelo. Caso seja compatível reduza um ou dois níveis de energia mesmo assim a dor continuar pare com o tratamento e procure orientação médica. Depile a área e retome o tratamento. Caso tratamento seja fotodepilação. Pare imediatamente o tratamento e entre em contato com a Basall Verifique o capítulo Advertências e Precauções e o capítulo Contra Indicação.
Os pelos começam a crescer novamente nas mesmas áreas em que o tratamento foi realizado.	Normal nas primeiras aplicações Verifique de sua pele é compatível Sobreposição de aplicações Ajuste dos níveis de energia	Nada a fazer, apenas continue o tratamento Caso não seja pare imediatamente o tratamento. Vide tabela de Aplicação e níveis de energia. Verifique se você está fazendo sobreposição de aplicação vide capítulo Instruções de uso, passo 6 - Aplicação. Verifique se os ajuste de níveis de energia estão compatíveis com cor de pele e cor de pelo. Vide tabela de Aplicação e níveis de energia.

Especificação

Carregador:	Entrada: 100-240V C.A., 1.2A Saída: 12V C.C., 3A
Frequência nominal:	50Hz/60Hz
Comprimento de onda de pulso:	>510nm para Lâmpada HR >560nm para Lâmpada SR >410nm para Lâmpada AC
Largura de pulso:	15-25ms
Tamanho do foco:	4,5cm ² (15x30) mm
Dimensões máximas:	157.5mm x 80mm x 187mm
Tempo de vida da Lâmpada:	95.000 Disparos para Lâmpada HR 95.000 Disparos para Lâmpada SR 95.000 Disparos para Lâmpada AC
Peso líquido :	370g (não inclui carregador e acessórios)

Condições para uso

- Temperatura ambiente: 15°C ~ 40°C;
- Umidade relativa: 25% a 75%;
- Aparelho não adequado ao uso na presença de uma mistura anestésica inflamável com ar, oxigênio ou óxido nitroso.

Pictogramas



Indica a posição vertical correta da caixa de transporte. Este lado para cima.



Caixa de transporte deve ser mantida longe da chuva



Conteúdo da caixa de transporte são frágeis, por isso, devem ser manuseados com cuidado



Atenção, consultar documentos acompanhantes

IPX0

Equipamento comum (Equipamento fechado sem proteção contra penetração de água)



Equipamento de tipo BF



Não descartar em lixo comum (ver tópico Proteção do Meio Ambiente)



Proibido derramar líquido



Fabricante



Equipamento de Classe II